


## ◇従来品の特徴

密閉されたガラスアンプルは揮発性の標準物質を保存するのに理想的ですが、一度開けてしまうと保存に適しません。代わりにスクリューキャップ式の容器を用いても、キャップのネジ溝を通して溶液が蒸発したり、キャップからコンタミが発生するリスクもあります。

## ◇CERTAN の利点

- ◎ キャピラリー型の開口部が汚染物の混入リスクを抑えます。
  - ◎ テフロン内張りキャップにより、溶液の蒸発量を最少化します。
  - キャップを開けている間もほとんど濃度変化が起こりません。
  - DURAN<sup>®</sup>ガラス製で-30℃から+50℃において品質が保証されています。
  - 標準的な GC シリンジ(※)で容易に充填・採取できます。
- (※)針径 0.8mm 以下、長さ 70mm 以上

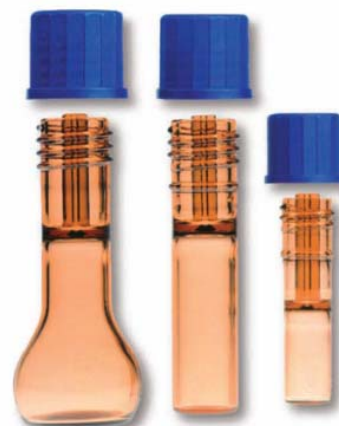

## ◇CERTAN の使用例

- ✚ ガラスアンプル内の液体の保存
- ✚ 標準溶液, ストック溶液の保存
- ✚ 揮発性化合物(BTEX 芳香族など)の保存

CERTAN はキャピラリー型の開口部を持つサンプル容器です。標準溶液や揮発性サンプルの保存目的に特化した容器であり、お客様の用途に応じたサイズをご用意しております。


品番	仕様	販売価格
DE-CE 01	1.5ml, diam. x H 12mm x 50mm	¥ 2,100
DE-CE 05	4.5ml, diam. x H 16mm x 71mm	¥ 3,400
DE-CE 10	10ml, diam. x H 30mm x 71mm	¥ 4,000

## ◇CERTAN 洗浄キット

御使用前や溶液の入替えの際、ボトル内部を洗浄・乾燥するために必要となります。

品番	販売価格
DE-WB 1000	¥30,000

※洗浄後の乾燥の際、昇温によりボトルの褐色が消失する場合があります。

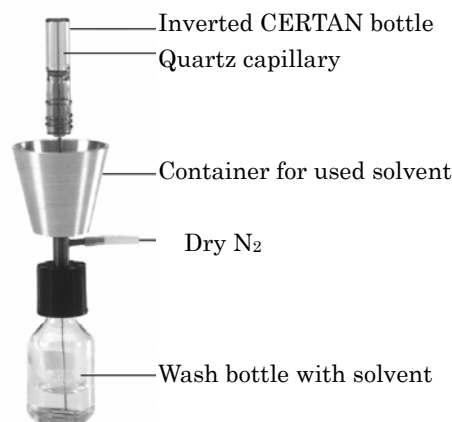

西進商事株式会社 英国 LGC 社 正規代理店 <http://www.seishin-syoji.co.jp>

神戸本社 TEL (078)303-3810 FAX (078)303-3822  
 東京支社 TEL (03)3459-7491 FAX (03)3459-7499  
 名古屋営業所 TEL (052)586-4741 FAX (052)586-4796  
 北海道営業所 TEL (011)221-2171 FAX (011)221-2010

CER-SY1104